


香精和香料化合物

Column: **MEGA-ACID (FFAP) - 0.25mm, 0.25 μ m, 25m**

Catalog Code: C-ACID-025-025-25

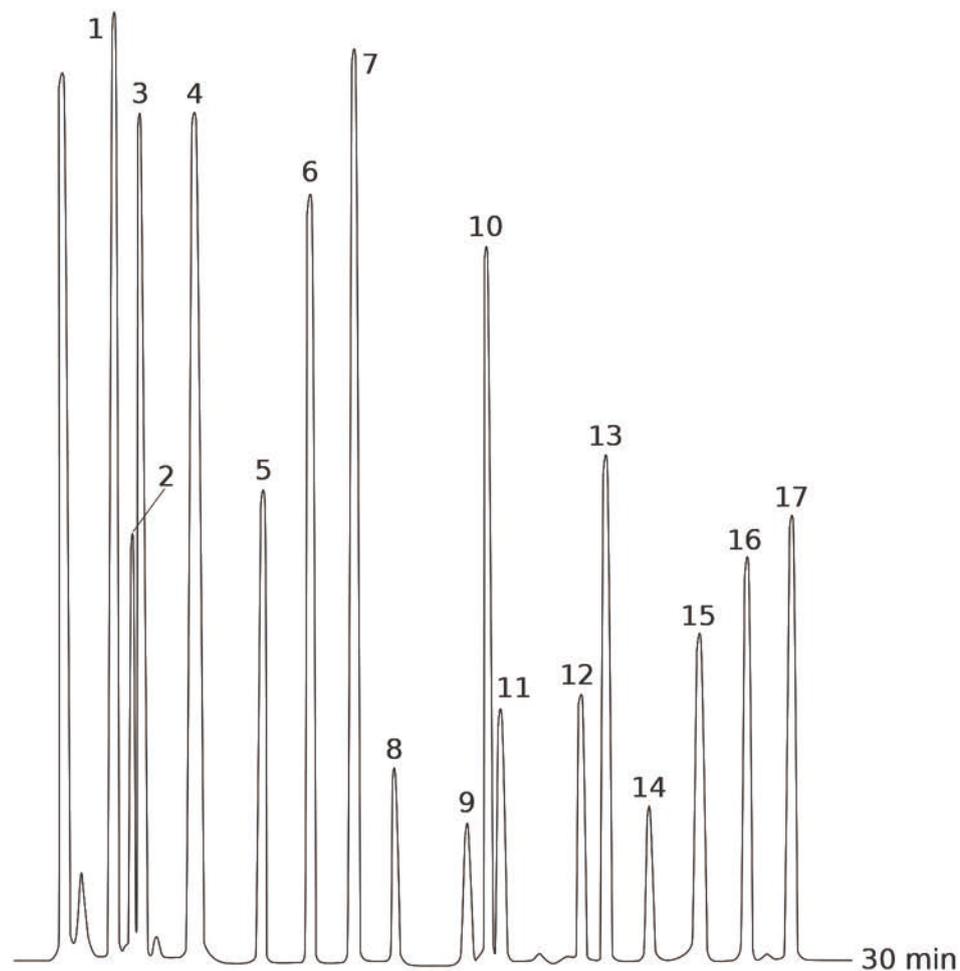

条件:

进样口: 分流 250 $^{\circ}$ C

检测器: FID 250 $^{\circ}$ C

柱温箱程序: 75-140 $^{\circ}$ C, 2 $^{\circ}$ C/min

载气: 氦气, 1.5mL/min

峰:

1. 乙酸异戊酯
2. α -水芹烯(I.S.)
3. 异丙苯
4. 1-戊醇
5. 甲基庚烯酮
6. 2-壬酮
7. 辛酸乙酯
8. 糠醛
9. 苯甲醛
10. 芳樟醇
11. 异丁酸
12. 正丁酸
13. 癸酸乙酯
14. 呋喃甲醇
15. α + β -松油醇
16. 香芹酮
17. 水杨酸甲酯