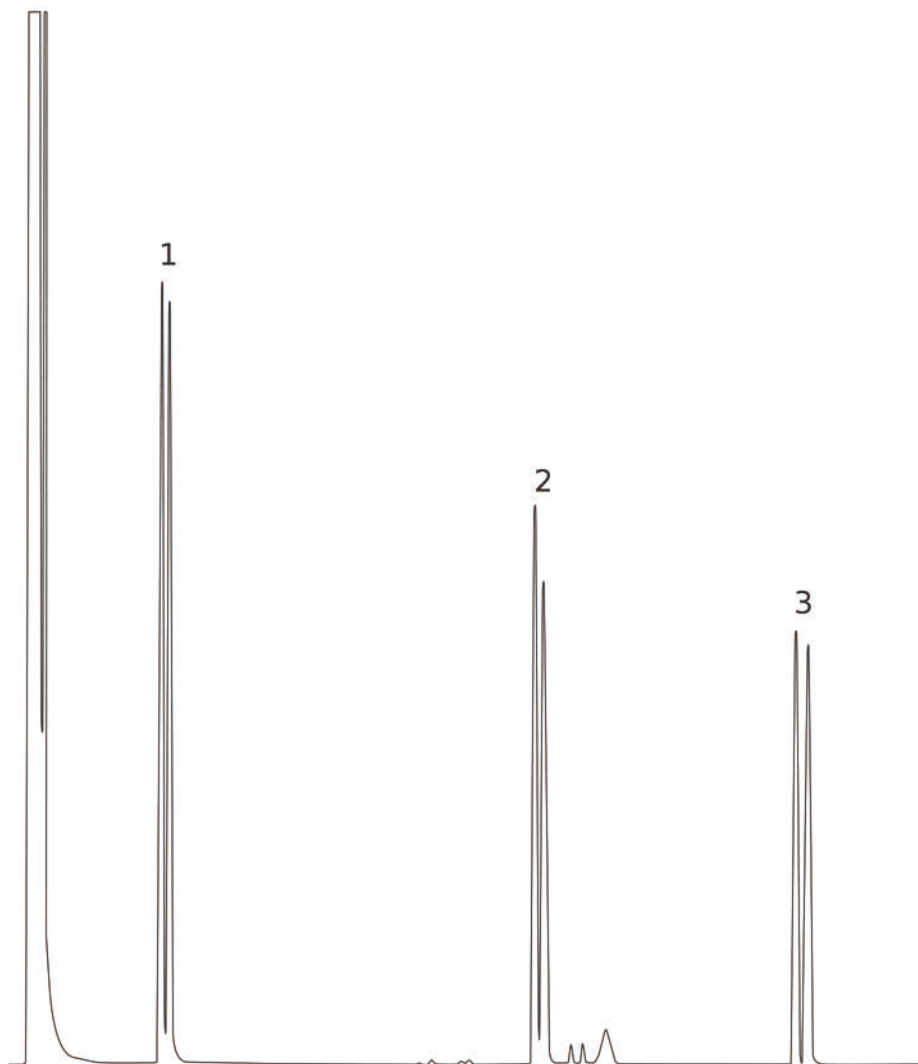




α -蒎烯, 芳樟醇, 薄荷醇(+/-)的手性分离

Column: **MEGA-DEX DET Beta - 0.25mm, 0.25 μ m, 25m**

Catalog Code: DEX-DET-B-025-025-25

条件:

进样口: 分流250 $^{\circ}$ C, 0.5L的进样量, 1:50的分流比

样品稀释: 1ml的正己烷中溶解1mg的样品

柱温箱程序: 75 $^{\circ}$ C-160 $^{\circ}$ C, 1 $^{\circ}$ C/min

检测器: FID 250 $^{\circ}$ C

载气: 氢气, 75kPa

峰:

1. (+/-) α -蒎烯
2. (+/-) 芳樟醇
3. (+/-) 薄荷醇