

橄榄油-脂肪酸甲酯 (*cis/trans* isomers)

Column: **MEGA-10 - 0.32mm, 0.25μm, 50m**

Catalog Code: C-10-032-025-50


条件:

进样口: 分流 250°C, 1:100分流比, 1.5μL进样量

检测器: FID 250°C

柱温箱程序: 150-190°C, 1°C/min

载气: 氢气, 60kPa

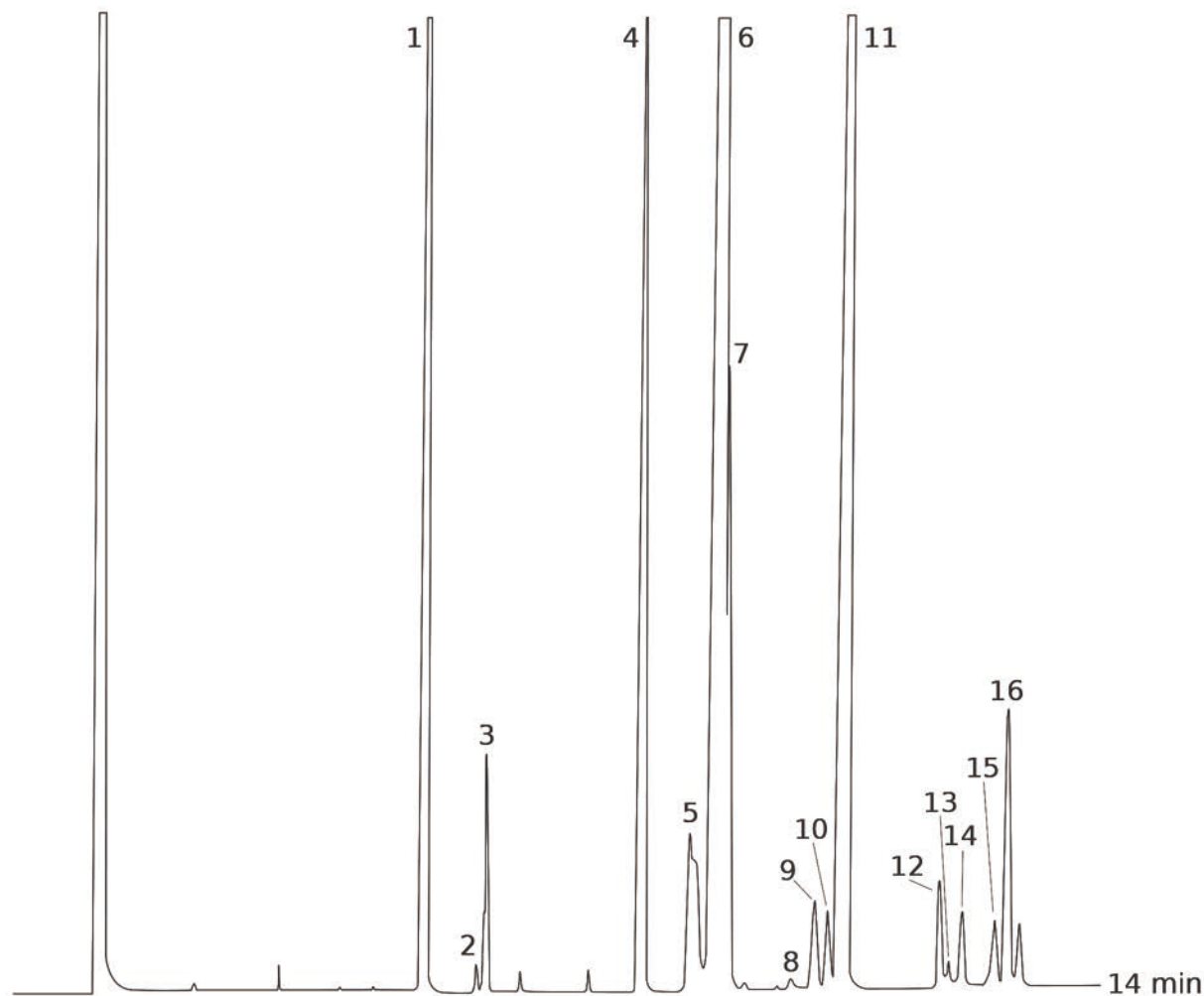

峰:

1. 棕榈酸
2. 反式棕榈烯酸
3. 棕榈烯酸
4. 硬脂酸
5. 反式岩芹酸
- 反式反油酸
- 反式十八碳烯酸
6. 油酸
7. 顺式-十八碳烯酸
8. 反式亚油酸
9. 顺反式亚油酸
10. 反式顺亚油酸
11. 亚油酸
12. 花生酸
13. 反顺反式亚麻酸
14. 顺顺式亚麻酸
15. 反顺顺式亚麻酸
16. 顺顺顺式亚麻酸