


乙酸在乙醇中的检测

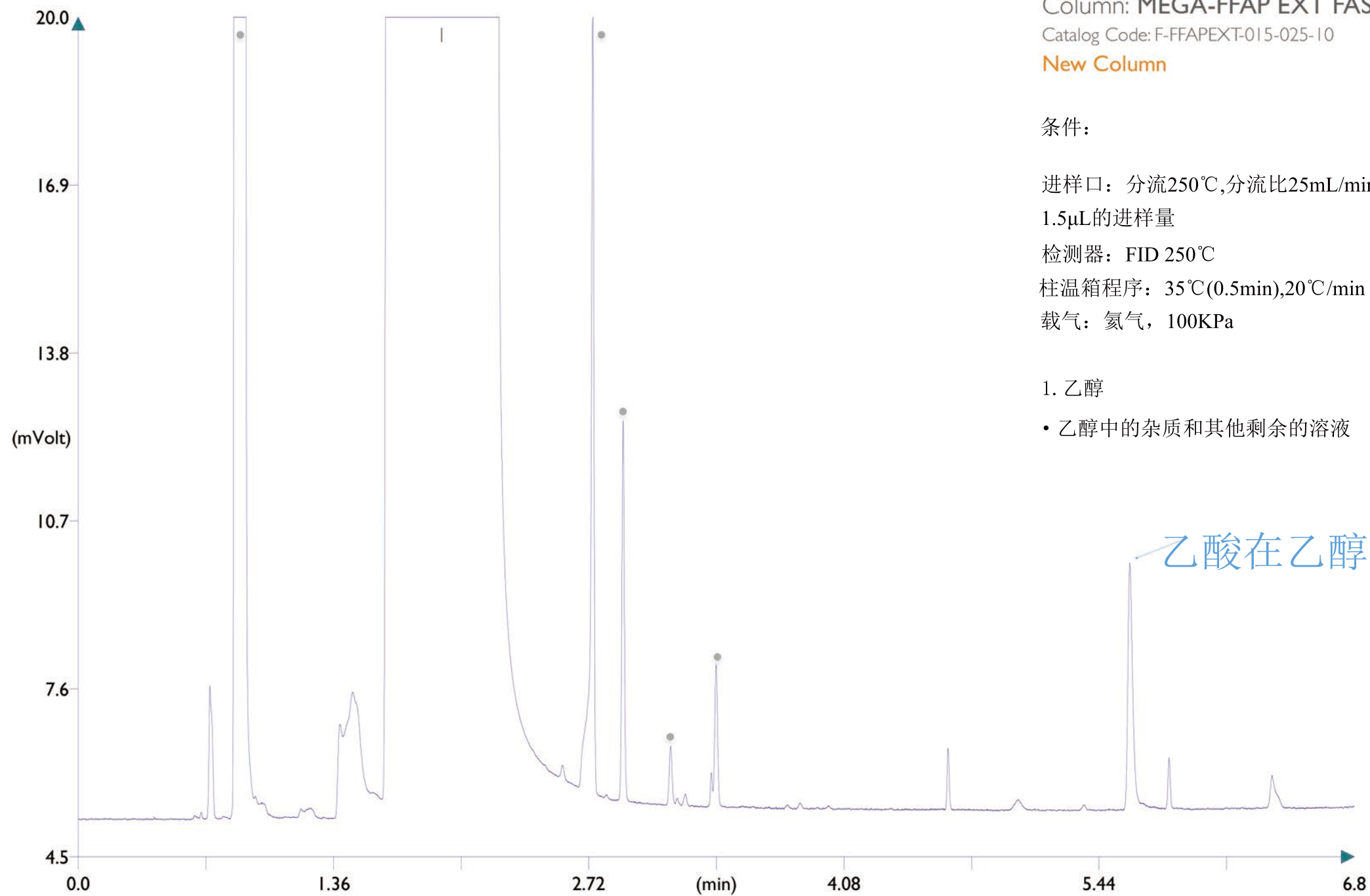

Column: MEGA-FFAP EXT FAST - 0.15mm, 0.25 μ m, 10m

Catalog Code: F-FFAPEXT-015-025-10

New Column

条件:

进样口: 分流250 $^{\circ}$ C,分流比25mL/min

1.5 μ L的进样量

检测器: FID 250 $^{\circ}$ C

柱温箱程序: 35 $^{\circ}$ C(0.5min),20 $^{\circ}$ C/min

载气: 氦气, 100KPa

1. 乙醇

• 乙醇中的杂质和其他剩余的溶液

乙酸在乙醇中100ppm的含量